

MEDYCZNA BARIEROWA POŚCIEL ZMYWALNA

CLINIBED®



Pościel Barrierowa Clinibed® – Ekonomiczne Rozwiązanie, Ochrona i Komfort dla Pacjentów

Medyczne pościelie bakteriostatyczne francuskiej firmy Clinibed, zostały opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego i komfortowego środowiska w szpitalach i ogólnej opiece zdrowotnej. Kołdry, poduszki, medyczne Clinibed z unikalną formułą ochrony bakteriostatycznej jonami srebra to doskonała higiena i łatwe odkażanie bez potrzeby prania. Dzięki zastosowaniu profesjonalnej pościeli zmywalnej, użytkownik zmniejsza ryzyko zakażeń, obniży koszty funkcjonowania oraz podnosi standardy użytkowania tzw. „miękkich” powierzchni medycznych, które są często obszarem niedostatecznie zabezpieczonym. Nasz bogaty asortyment profesjonalnej pościeli barierowej jest szczególnie polecany dla szpitali, oddziałów ratunkowych domów opieki, DPS-ów oraz użytku domowego.

Poduszki, pozycjonery, prześcieradła, koce i kołdry bakteriostatyczne zmywalne - zapewniają pacjentom ciepło i komfort w najlepszych warunkach higienicznych. Alergeny, wirusy i płyny nie dostają się do pościeli - pozostają czyste wewnątrz, a powierzchnia zewnętrzna jest łatwa i szybka do czyszczenia. Łatwość dezynfekcji pozwala znacząco obniżyć koszty użytkowania i wydłużyć ich żywotność. Wszystkie oferowane produkty zmywalne Clinibed są niepalnymi wyrobami medycznymi i posiadają certyfikaty jakości wielu niezależnych instytucji. Siedziba, dział badawczo- rozwojowy oraz produkcyjny od 25 lat znajduje się we Francji.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT . Telefon: +48 690 486 043.

Biuro : Poznań ul. Pomarańczowa 9 61-612 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09



Kołdry Bakteriostatyczne Zmywalne Clinibed®

Medyczna kołdra zmywalna z antybakteryjnymi jonami srebra - doskonała higiena i łatwe odkażanie. Wykonana z wodoodpornego, bakteriostatycznego materiału, zapewnia skuteczną izolację przed zimnem, wilgocią oraz płynami. Dzięki temu można ją bezpiecznie stosować w różnego rodzaju sytuacjach medycznych lub awaryjnych w domu.

Parametry techniczne: Wypełnienie to specjalne spiralne włókno HEATUP regulującym i przywracającym ciepło ciała, jest to włókno o dużej zdolności adiaternicznej standard NF G07 107, posiada również bardzo dobrą odporność mechaniczną. Pokrycie poliestrowe 40% z poliuretanem 60% jest hipoalergiczne, bakteriostatyczne, elastyczne i przyjemne w dotyku. Kołdra jest łączona specjalnymi wewnętrznymi szczelnymi szwami lub opcjonalnie szwami zgrzewanymi. Produkt jest ognioodporny zgodnie z klasyfikacją ogniową M1.

Cechy użytkowe: Wodoodporna- stanowi barierę dla cieczy, nie przepuszcza wydzielin. Oddychalna- ułatwia wymianę powietrza i szybko reguluje ciepłotę ciała. Bakteriostatyk- AG2+ Jon srebra, zabezpieczenie antybakteryjne. Obróbka jonów srebra jest integrowana z masą powłoki poliuretanowej podczas jej produkcji, co gwarantuje ochronę bakteriostatyczną przez cały okres użytkowania. To aktywny proces ochronny przed namnażaniem się i inwazyjnym działaniem zarazków oraz bakterii. Testowany pod kątem odporności na MRSA (Staphylococcus Aureus). Walka z Multi-Resistant Bacteria.


Zgodny z normą REACH i normą OekoTex 100 klasa IV. Norma EN 45014

Rozmiary kołder : COUV 140x200; 160x200; 110x190; 120x200 cm

Kolory: zieleń medyczna, szary, niebieski królewski, morski, biały.

Mycie i dezynfekcja pościeli powinna być wykonywana preparatami nie zawierającymi kwasu octowego i chloru ponieważ ogranicza ich czas użytkowania. Producent zaleca dezynfekcję środkami bazy chlorek didecyldimetyloamoniowy oraz środkami na bazie alkoholu lub nadtlenku wodoru. Te preparaty zapewniają szerokie działanie biobójcze i są bezpieczne dla pościeli Clinibed. W przypadku zwykłego mycia można stosować preparaty myjące dla polipropylenu i poliestru. Ręcznie przy pomocy chusteczki lub gąbki nasączonej bezchlorowym roztworem dezynfekcyjnym. Pranie mechaniczne w przypadku silnego zabrudzenia, kołdrę można prać w pralce przy użyciu zwykłych środków czyszczących. Maksymalna temperatura prania 95°C.

W cyklu prania niezbędne jest wirowanie i suszenie z prędkością 1000 obr/min, co pozwala na odprowadzenie wody z kołdry.

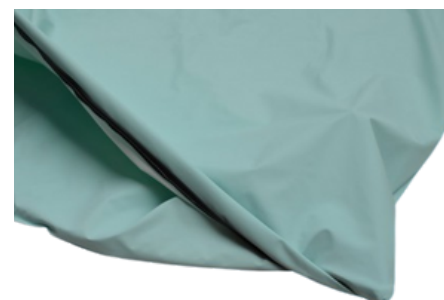

CLINIBED®



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT . Telefon:+48 690 486 043.

Biuro : Poznań ul. Pomarańczowa 9 61-612 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09

Poduszki Bakteriostatyczne Zmywalne OPTI-OR



Medyczne poduszki barierowe Opti-Or z unikalną formułą ochrony bakteriostatycznej - doskonała higiena i łatwe odkażanie bez potrzeby prania. Zmywalne poduszki Clinibed® to idealne rozwiązanie dla osób, które poszukują higienicznej, oddychającej i wygodnej poduszki do zastosowań medycznych, domowych oraz komercyjnych. Produkt wykonany jest z wodoodpornego, bakteriostatycznego materiału z powłoką antybakteryjną, który chroni przed rozmnażaniem się drobnoustrojów na powierzchni poduszki, eliminując ryzyko infekcji czy reakcji alergicznych. Może być stosowany jako element profilaktyczny w walce z infekcjami szpitalnymi oraz jako środek ochrony osobistej przed kontaktami z patogenami przenoszonymi drogą kropelkową. Poduszka zmywalna posiada odpowiednią twardość, dzięki czemu zapewnia optymalne wsparcie dla szyi i głowy podczas snu.



Cechy użytkowe: Wodoodporna- stanowi barierę dla cieczy, nie przepuszcza wydzielin. Oddychalna- ułatwia wymianę powietrza i szybko reguluje ciepłotę ciała. Bakteriostatyk- AG2+ Jon srebra, zabezpieczenie antybakteryjne. Obróbka jonów srebra jest integrowana z masą powłoki poliuretanowej podczas jej produkcji, co gwarantuje ochronę bakteriostatyczną przez cały okres użytkowania. To aktywny proces ochronny przed namnażaniem się i inwazyjnym działaniem zarazków oraz bakterii. Testowany pod kątem odporności na MRSA (Staphylococcus Aureus). Walka z Multi-Resistant Bacteria. Zgodny z normą REACH i normą OekoTex 100 klasa IV. Norma EN 45014



Parametry techniczne: Pokrycie poliestrowe 40% z poliuretanem 60% jest hipoalergiczne, bakteriostatyczne, elastyczne i przyjemne w dotyku. Wypełnienie z pustych włókien OEKO TEX Standard 100 - Global Recycled Standard, zapewnia komfort termiczny. Powłoka poduszki łączona jest specjalnymi szwami wewnętrznymi, całkowicie zabezpieczającymi wypełnienie i gwarantującymi aseptyczność.



Rozmiar : Opti-or 30x30; 40x40; 60x60; 50x60; 60x70; 50x70; 60x80 cm.

Kolory: Niebieski Królewski, Zieleń Medyczna, Biały, Pomarańczowy

Mycie i dezynfekcja poduszek powinna być wykonywana preparatami nie zawierającymi kwasu octowego i chloru ponieważ ogranicza ich czas użytkowania. Producent zaleca dezynfekcję środkami bazie chlorek didecylodimetyloamoniowy oraz środkami na bazie alkoholu lub nadtlenu wodoru. Te preparaty zapewniają szerokie działanie biobójcze i są bezpieczne dla poduszek. W przypadku zwykłego mycia można stosować preparaty myjące dla polipropylenu i poliestru. Ręcznie przy pomocy chusteczki lub gąbki nasączonej bezchlorowym roztworem dezynfekcyjnym. Następnie przetrzyj powierzchnię suchą włókniną. Poduszka nie jest przeznaczona do prania ręcznego lub maszynowego.



CLINIBED®



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT . Telefon: +48 690 486 043.

Biuro : Poznań ul. Pomarańczowa 9 61-612 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09

Prześcieradło bakteriostatyczne zmywalne Clinicare

Zmywalne prześcieradło na materac, obszyte elastyczną taśmą do lepszego mocowania na materacach dowolnych typów. Pokrowce Clinicare M1 pokryte są antybakteryjnymi jonami srebra zapewniając doskonałą higienę oraz łatwe mycie i dezynfekcję. To wodoodporne "oddychające" prześcieradło zapewnia skuteczną ochronę materaca przed zamoczeniem i wilgocią, wygodę użytkownika oraz komfort pacjenta. Dodatkowo, dzięki właściwościom bakteriostatycznym minimalizuje się ryzyko rozprzestrzeniania się drobnoustrojów i infekcji. Jest łatwe w użyciu, zapewnia komfortowy i bezpieczny higieniczny sen.

Prześcieradło zmywalne barierowe CLINICARE M1 może być używane w różnorodnych miejscach i sytuacjach. Wybór rozmiarów sprawia, że idealnie nadaje się do użytku na sali operacyjnej, pooperacyjnej, oddziale szpitalnym, DPS lub w warunkach opieki domowej. Może również być stosowane w służbach ratunkowych oraz karetkach pogotowia. Jest to produkt niezastąpiony wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymanie wysokiego standardu higieny i bezpieczeństwa epidemiologicznego. Ogranicza wydatki w częstym praniu prześcieradeł, zmniejsza ryzyko zalanania i kontaminacji drogich w zakupie materacy.

Parametry techniczne: Bardzo wysoka odporność mechaniczna i trwałość, nie zawiera drażniących włókien zgodnie z europejską normą REACH. Pokrycie poliestrowe 40% z poliuretanem M1-60%, 140 gm² jest wodoodporne, elastyczne i przyjemne w dotyku.



Produkt jest ognioodporny zgodnie z klasyfikacją ogniową M1.

Cechy użytkowe: Oddychające- zapewnia wymianę powietrza. Wodoodporność- stanowi barierę dla cieczy, nie przepuszcza wydzielin. Bakteriostatyczny- AG2+ Jon srebra zabezpieczenie antybakteryjne. Naturalny zabieg neutralizujący namnażanie się i inwazyjne działanie zarasków oraz bakterii. Testowany pod kątem odporności na MRSA Staphylococcus Aureus. Walka Multi-Resistant Bacteria. Zgodny z normą REACH i normą OekoTex 100 klasa IV. Norma EN 45014.

Rozmiar: DEP 140x200x15; 140x190x15; 60x120; 90x190x15; 90x200x15; 160x200x20 cm

Kolor: zieleń medyczna, niebieski królewski, biały

Mycie i dezynfekcja ręcznie przy pomocy chusteczki lub gąbki nasączonej bezchlorowym roztworem dezynfekcyjnym. Następnie przetrzyj powierzchnię suchą włókniną. Pranie mechaniczne, można prać w pralce przy użyciu zwykłych, niezawierających chloru środków czyszczących. Stosowanie chloru może prowadzić do stwardnienia materiału i ostatecznie rozwarstwienia pokrycia. Maksymalna temperatura prania nie może przekroczyć 95°C. Nie wirować i nie prasować!

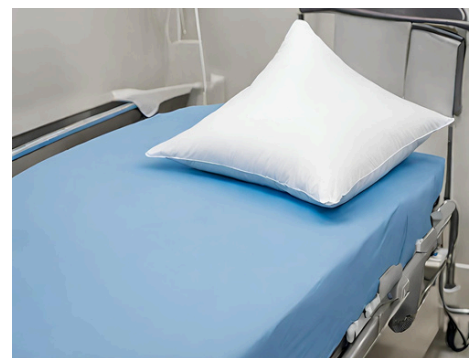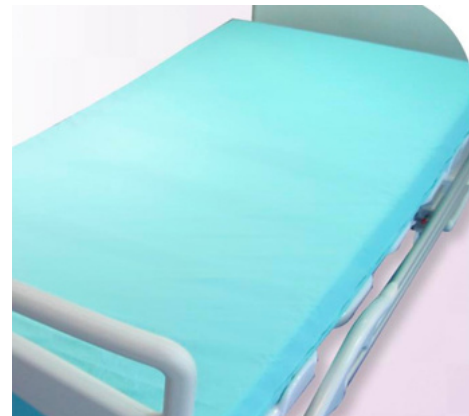

CLINIBED®



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT . Telefon:+48 690 486 043.

Biuro : Poznań ul. Pomarańczowa 9 61-612 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09

Mata ślizgowa Bed Slide z uchwytami

Mata ślizgowa z uchwytami do transportu pacjenta to idealne rozwiązanie dla personelu medycznego, który musi przemieszczać obłożnie chorych pacjentów. Dzięki symetrycznie rozmieszczonym uchwytom opiekunowie mogą wygodnie i bezpiecznie przemieszczać pacjenta z łóżka na inne miejsce. To narzędzie nie tylko ułatwia pracę personelowi medycznemu, ale także zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo pacjentowi podczas transportu.

Mata ślizgowa BedSlide to pomoc techniczna ułatwiająca obsługę pacjenta, umożliwia podnoszenie go, obracanie i przenoszenie z łóżka na nosze lub wózek inwalidzki. Podkład wykonany z cienkiego i jednocześnie wytrzymałego nylonu, powlekanego silikonem, co sprawia, że materiał jest bardzo śliski, ułatwiając opiekę nad chorym.

Specyfikacja produktu :

Prześcieradło ślizgowe jest wygodnym rozwiązaniem do przemieszczania obłożnie chorych pacjentów. Wyposażone w symetrycznie rozmieszczone uchwyty ułatwiające dwóm opiekunom bezpieczne wykonywanie swoich zadań. Wyrób, z uwagi na dużą wytrzymałość, może być stosowany na oddziałach bariatrycznych.

Wykonany z materiału o niskim współczynniku tarcia, 15% silikon / 85% poliamid łatwy w myciu i dezynfekcji. Kolory niebieski, uchwyty kolor żółty.

Rozmiar :

70x130 cm; 2 uchwyty. Symbol BEDSLIDE30P

70x190 cm; 2 uchwyty. Symbol BEDSLIDE31P

110x130 cm; 4 uchwyty. Symbol BEDSLIDE32P

110x190 cm; 6 uchwytów. Symbol BEDSLIDE33P

Mycie i dezynfekcja: Ręcznie przy pomocy chusteczki lub gąbki nasączonej roztworem dezynfekcyjnym. Pranie mechaniczne przy użyciu zwykłych preparatów czyszczących. Maksymalna temperatura prania nie powinna przekraczać 60°C.



CLINIBED®



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT . Telefon:+48 690 486 043.

Biuro : Poznań ul. Pomarańczowa 9 61-612 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09

Poduszki przeciwoleżynowe, zmywalne, pozycjonujące

Poduszki pozycjonujące do pielęgnacji pacjenta leżącego.

Nasze poduszki pozycjonujące Clinibed® przeznaczone są dla pacjentów obłożnie chorych, którzy pozostają w pozycji leżącej przez długie godziny i w związku z tym są narażeni na ryzyko wystąpienia odleżyn. Nadają się do szpitali, klinik, domów opieki społecznej oraz opieki domowej. Dzięki wypełnieniu specjalnymi mikrokulkami zapewniają wsparcie dla różnych części ciała, ułatwiają zmianę pozycji i odciążają punkty nacisku.

Poduszki przeciwoleżynowe skutecznie wpływają na komfort i zdrowie niesamodzielnych pacjentów. Są szczególnie odpowiednie dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, cierpiących na chorobę Alzheimera lub Parkinsona. Poduszki skutecznie redukują punkty ucisku w miejscach podparcia: łokcie, pięty, biodra, kolana, głowa, szyja. Umożliwiają ułożenie w pozycji leżącej na boku pod kątem 30° i w pozycji pół-łóżkowej pod kątem 30°. Pokryte są oddychającą, wodoodporną i miękką w dotyku powłoką poliuretanową. Są łatwe w myciu i dezynfekcji. Wyrób medyczny zapewniający wsparcie pacjenta i przyczyniający się do zapobiegania odleżynom. Bogata oferta poduszek pozycjonujących CLINIBED® umożliwia różne kombinacje pozycji leżących pacjenta i skutecznie wpływa na komfort, dobre samopoczucie i zapobieganie odleżynom.

Parametry techniczne: Innowacyjny pokrowiec CLINICARE bi-elastyczny, poliamid pokryty poliuretanem. Wypełnienie z drobnoziarnistej mikrokulki polistyrenowej jest hipoalergiczne, bakteriostatyczne. Technologia EHPAD wypełniania mikrokulkami zapewnia pacjentowi bardzo wygodne ułożenie ciała dzięki swojemu ergonomicznemu efektowi. Łączona specjalnymi szwami wewnętrznymi.

Rozmiar i rodzaj:

Poduszka cylindryczna 70x17 cm. Waga 450 g. Symbol CLINEG0613.

Poduszka prostokątna 40x60 cm. Waga 595g. Symbol CLINEG0605

Poduszka cylindryczna 2 szt. 30x17 cm. Waga 225 g. Symbol CLINEG0605

Poduszka pod głowę i szyję 130x18 cm. Waga 445 g. Symbol CLINEG0605

Poduszka do podparcia 260x60 cm. Waga 2500 g. Symbol CLINEG0605

Kolory: Niebieski Królewski lub Zielony

Mycie i dezynfekcja: Ręcznie przy pomocy chusteczki lub gąbki nasączonej bezchlorowym roztworem dezynfekcyjnym. Pranie mechaniczne: poduszkę prać w pralce przy użyciu zwykłych, niezawierających chloru środków czyszczących. Stosowanie chloru może prowadzić do stwardnienia materiału i ostatecznie rozwarstwienia pokrycia. Maksymalna temperatura prania nie powinna przekraczać 90°C. W cyklu prania niezbędne jest wirowanie z prędkością 1000 obr/min, co pozwala na odprowadzenie wody z powierzchni pokrowca.



CLINIBED®

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT . Telefon:+48 690 486 043.

Biuro : Poznań ul. Pomarańczowa 9 61-612 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09