

Kołdry Bakteriostatyczne Zmywalne Clinibed®

Medyczna kołdra zmywalna z antybakteryjnymi jonami srebra - doskonała higiena i łatwe odkażanie. Wykonana z wodoodpornego, bakteriostatycznego materiału, zapewnia skuteczną izolację przed zimnem, wilgocią oraz płynami. Dzięki temu można ją bezpiecznie stosować w różnego rodzaju sytuacjach medycznych lub awaryjnych w domu.

Parametry techniczne: Wypełnienie to specjalne spiralne włókno HEATUP regulującym i przywracającym ciepło ciała, jest to włókno o dużej zdolności adiaternicznej standard NF G07 107, posiada również bardzo dobrą odporność mechaniczną. Pokrycie poliestrowe 40% z poliuretanem 60% jest hipoalergiczne, bakteriostatyczne, elastyczne i przyjemne w dotyku. Kołdra jest łączona specjalnymi wewnętrznymi szczelnymi szwami lub opcjonalnie szwami zgrzewanymi. Produkt jest ognioodporny zgodnie z klasyfikacją ogniową M1.

Cechy użytkowe: Wodoodporna- stanowi barierę dla cieczy, nie przepuszcza wydzielin. Oddychalna- ułatwia wymianę powietrza i szybko reguluje ciepłotę ciała. Bakteriostatyk- AG2+ Jon srebra, zabezpieczenie antybakteryjne. Obróbka jonów srebra jest integrowana z masą powłoki poliuretanowej podczas jej produkcji, co gwarantuje ochronę bakteriostatyczną przez cały okres użytkowania. To aktywny proces ochronny przed namnażaniem się i inwazyjnym działaniem zarazków oraz bakterii. Testowany pod kątem odporności na MRSA (Staphylococcus Aureus). Walka z Multi-Resistant Bacteria.

Zgodny z normą REACH i normą OekoTex 100 klasa IV. Norma EN 45014


Rozmiary kołder : COUV 140x200; 160x200; 110x190; 120x200 cm

Kolory: zieleń medyczna, szary, niebieski królewski, morski, biały.

Mycie i dezynfekcja pościeli powinna być wykonywana preparatami nie zawierającymi kwasu octowego i chloru ponieważ ogranicza ich czas użytkowania. Producent zaleca dezynfekcję środkami bazy chlorek didecyldimetyloamoniowy oraz środkami na bazie alkoholu lub nadtlenku wodoru.

Te preparaty zapewniają szerokie działanie biobójcze i są bezpieczne dla pościeli Clinibed. W przypadku zwykłego mycia można stosować preparaty myjące dla polipropylenu i poliestru. Ręcznie przy pomocy chusteczki lub gąbki nasączonej bezchlorowym roztworem dezynfekcyjnym. Pranie mechaniczne w przypadku silnego zabrudzenia, kołdrę można prać w pralce przy użyciu zwykłych środków czyszczących. Maksymalna temperatura prania 95°C.

W cyklu prania niezbędne jest wirowanie i suszenie z prędkością 1000 obr/min, co pozwala na odprowadzenie wody z kołdry.

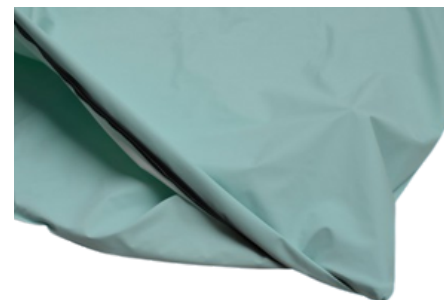

CLINIBED®



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce : MEDICAL SPOT . Telefon:+48 690 486 043.

Biuro : Poznań ul. Pomarańczowa 9 61-612 Polska

Web: www.medicalspot.pl Mail: kontakt@medicalspot.pl NIP: 781 124 45 09